# Лабораторная работа 5.1.3 Изучение рассеяния медленных электронов на атомах (эффект Рамзауэра)

Гаврилин Илья Добровольская Ксения Б01-110

20 ноября 2023 г.

**Цель работы:** Получить BAX эффекта на экране ЭО, измерить расстояния между характерными точками в вольтах; снять BAX в статическом режиме; по результатам измерений рассчитать размер электронной оболочки атома, оценить глубину потенциальной ямы и потенциал ионизации газа, заполняющего лампу.

## Теория

#### Эффект Рамзауэра

Эффективное сечение реакции — это величина, характеризующая вероятность перехода системы двух сталкивающихся частиц в результате их рассеяния (упругого или неупругого) в определенное конечное состояние. Сечение  $\sigma$  это отношение числа таких переходов N в единицу времени к плотности потока nv рассеиваемых частиц, падающих на мишень, т.е. к числу частиц, падающих в единицу времени на единичную площадку, перпендикулярно к их скорости.

$$\sigma = \frac{N}{nv} \tag{1}$$

Эффект Рамзауэра нельзя объяснить с позиции классической теории. С квантовой же точки зрения картина рассеяния выглядит следующим образом: внутри атома потенциальная энергия падающего электрона отлична от нуля, скорость электрона меняется, становясь равной v' в соответствии с законом сохранения энергии

$$E = \frac{mv^2}{2} = \frac{mv'^2}{2} + U$$

а значит, изменяется и длина его волны де-Бройля. Таким образом, по отношению к электронной волне атом ведет себя как преломляющая среда с относительным показателем преломления

$$n = \frac{\lambda}{\lambda'} = \sqrt{1 - \frac{U}{E}} \tag{2}$$

Решение задачи о рассеянии электрона на сферическом потенциале достаточно громоздко. Поэтому рассматривают более простое одномерное приближение: электрон рассеивается на потенциальной яме конечной глубины. После решения соответ-

ствующего уравнения Шрёдингера получается выражение для коэффициента прохождения:

$$D = \frac{16k_1^2k_2^2}{16k_1^2k_2^2 + 4(k_1^2 - k_2^2)^2\sin^2(k_2l)}$$
(3)

где  $k_1^2=\frac{2mE}{\hbar^2}, k_2^2=\frac{2m(E+U_0)}{\hbar^2}.$ 

Как легко видно, это периодическое выражение с максимумами при

$$k_2 l = \pi n = \sqrt{\frac{2m(E + U_0)}{\hbar^2}} l$$
 (4)

Это же условие можно получить, рассматривая интерференцию двух волн — прошедшей через атом и отраженной от границ атомного потенциала. Тогда получаются следующие выражения для эффективного размера атома l:

$$2l = \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}}\tag{5}$$

$$2l = \frac{3}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}} \tag{6}$$

 $\Gamma$ де  $E_1, E_2$  — энергии, соответствующие максимуму и минимуму прохождения электронов соответственно. Исключая  $U_0$  можно найти

$$l = \frac{h\sqrt{5}}{\sqrt{32m(E_2 - E_1)}}\tag{7}$$

А исключая l можно найти эффективную глубину потенциальной ямы атома:

$$U_0 = \frac{4}{5}E_2 - \frac{9}{5}E_1 \tag{8}$$

Так же можно вывести теоретически формулу, связывающую зависимость вероятности рассеяния электрона от его энергии:

$$w(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_a(V)}{I_0} \tag{9}$$

С помощью неё, имея BAX тиратрона, можно построить график w(V).

## Схема установки

Лампа-тиратрон ТГ301/1.3Б, заполненная инертным газом, расположена непосредственно на корпусе блока источников питания (БИП). Напряжение к электродам лампы подаются от источников питания, находящиеся в корпусе прибора. Регулировка напряжения и выбор режима работы установки производится при помощи ручек управления, выведенных на лицевую панель БИП.

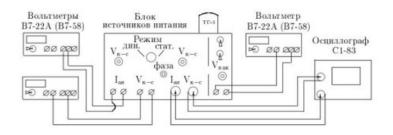


Рис. 1: Блок-схема экспериментальной установки

# Ход работы

Снимем с помощью осциллографа ВАХ при двух различных напряжениях, а затем измерим  $V_{\rm max},~V_{\rm min}$  в зависимости от  $U_{\rm накала}$ . Все данные, в том числе и изображения, занесем в таблицу.

$U_{\text{\tiny Hak}},\mathrm{B}$	$U_{\rm max},{ m B}$	$U_{\min}$ , B
3.36	4.8	9.2
3.16	5	9.4